


PRODUCT LINE

**DIMAR**

# DimAir Line

**GENERATORE CPAP CON MONITOR  
«EASY FLOW»**

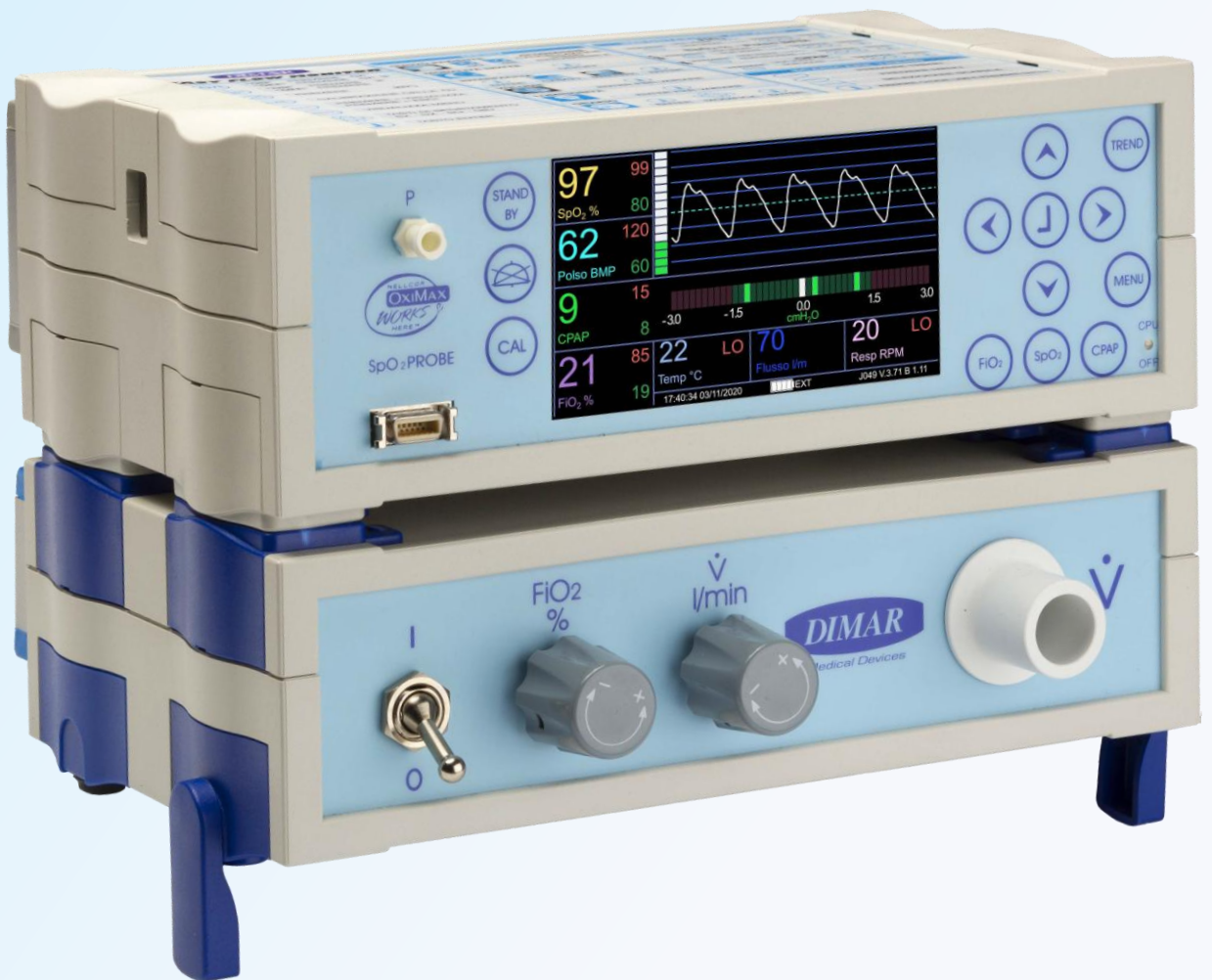

# GENERATORE CPAP CON MONITOR «EASY FLOW»

**Generatore di flusso Venturi per la somministrazione di tecniche CPAP in pazienti adulti, pediatrici e neonatali collegati a maschere, caschi o cannule nasali per alti flussi.**

**Flusso regolabile da 0 a 150 l/min.**

**FiO<sub>2</sub> regolabile dal 0,3 a 1 (30 ÷ 100%).**

**Dotato di monitoraggio e memorizzazione dei principali parametri funzionali del paziente.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione ad ossigeno medicale a rete o a bombola
- Valori di flusso e FiO<sub>2</sub> regolabili
- Dotato di allarmi acustici e visivi con soglie impostabili
- Dotato di batteria interna con autonomia > 5 ore
- Possibilità di utilizzo con umidificatori attivi e filtri/HME
- Utilizzabile con maschere, caschi o cannule nasali
- Dotato di ampio display per la visualizzazione dei parametri rilevati
- Raccordo di uscita ISO 22M
- Memorizzazione e download dei parametri monitorati tramite porta USB
- Adatto per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- Software e Firmware aggiornabile tramite porta USB

## PARAMETRI RILEVATI:

- Pulsossimetria SpO<sub>2</sub> [%]
- Frequenza Cardiaca [BPM]
- Pressione CPAP - PEEP [cmH<sub>2</sub>O]
- Frazione inspiratoria Ossigeno FiO<sub>2</sub> [%]
- Temperatura gas inspirati [°C]
- Flusso erogato [l/min]
- Frequenza respiratoria [rpm]
- Valore istantaneo IPAP – EPAP [cmH<sub>2</sub>O]
- Curva pletismografica



**700/6622**

**KIT PER COLLEGARE LA  
MASCHERA DIMAX AL  
GENERATORE CPAP EASY  
FLOW MONITOR.**

Completo di valvola PEEP regolabile CPAP e tubo di estensione per il monitoraggio della pressione.

CODICE	RDM	CND/EMDN
700/6358	1768132	Z12030102



**HMC Premedical S.p.A**

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I  
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546



0425