

DIMAR

PRODUCT LINE

DimAir Line



Standard



Amagnetica



***Sistema Flussi
Bidirezionale***

***Valvole PEEP Regolabili
con Filtro Antimicrobico >99%***

Valvole PEEP per il mantenimento di Pressioni Positive in sistemi respiratori dotate di membrana filtrante antimicrobica > 99%

- Regolabili senza soluzione di continuità da 0 a 20 cmH₂O approx
- Dotate di raccordo 22M per la connessione alle Interfacce Respiratorie (UNI EN ISO 5356-1)


Filtro integrato:

- Membrana Filtrante Integrata, idonea a limitare la diffusione di micro organismi nell'ambiente; efficacia ritenzione microbica > 99%
- Maggiore protezione per gli operatori

Destinazione d'uso:


- Rianimazione, Terapia Intensiva, Emergenza e reparti di degenza

Leggere, compatte e di minimo ingombro

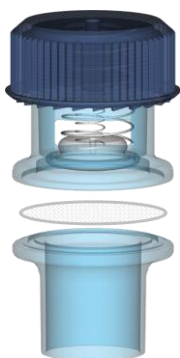


Regolabile con Molla

- Dotata di scala graduata indicante i valori di pressione espressi in cmH₂O (approx)
- Ideale per tutte le interfacce respiratorie

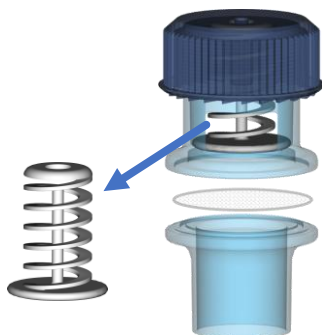

Regolabile con Molla Amagnetica

- Dotata di scala graduata indicante i valori di pressione espressi in cmH₂O (approx)
- Ideale per tutte le interfacce respiratorie
 - **Interamente realizzata in materiale Plastico**
 - RNM compatibile
 - Completamente Radiotrasparente
 - Radio-compatibile

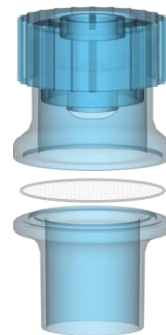

Con sistema Bidirezionale dei Flussi

- Dotata di sistema di sicurezza Bidirezionale dei flussi in caso di mancanza di flusso, prevenendo rischi di asfissia
- Dotata di Valvola di sicurezza ad apertura automatica per le pressioni superiori a 20 cmH₂O
- Ideale per Caschi per CPAP e NIMV
- Estremamente silenziosa

DESCRIZIONE VALVOLA PEEP	CODICE	RDM	CND/EMDN
Standard con molla	700/5050	2683521	R028001
Amagnetica	700/5045		
Bidirezionale	700/5049		



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546

