


DIMAR

PRODUCT LINE

Intensive Care

DimAir Line

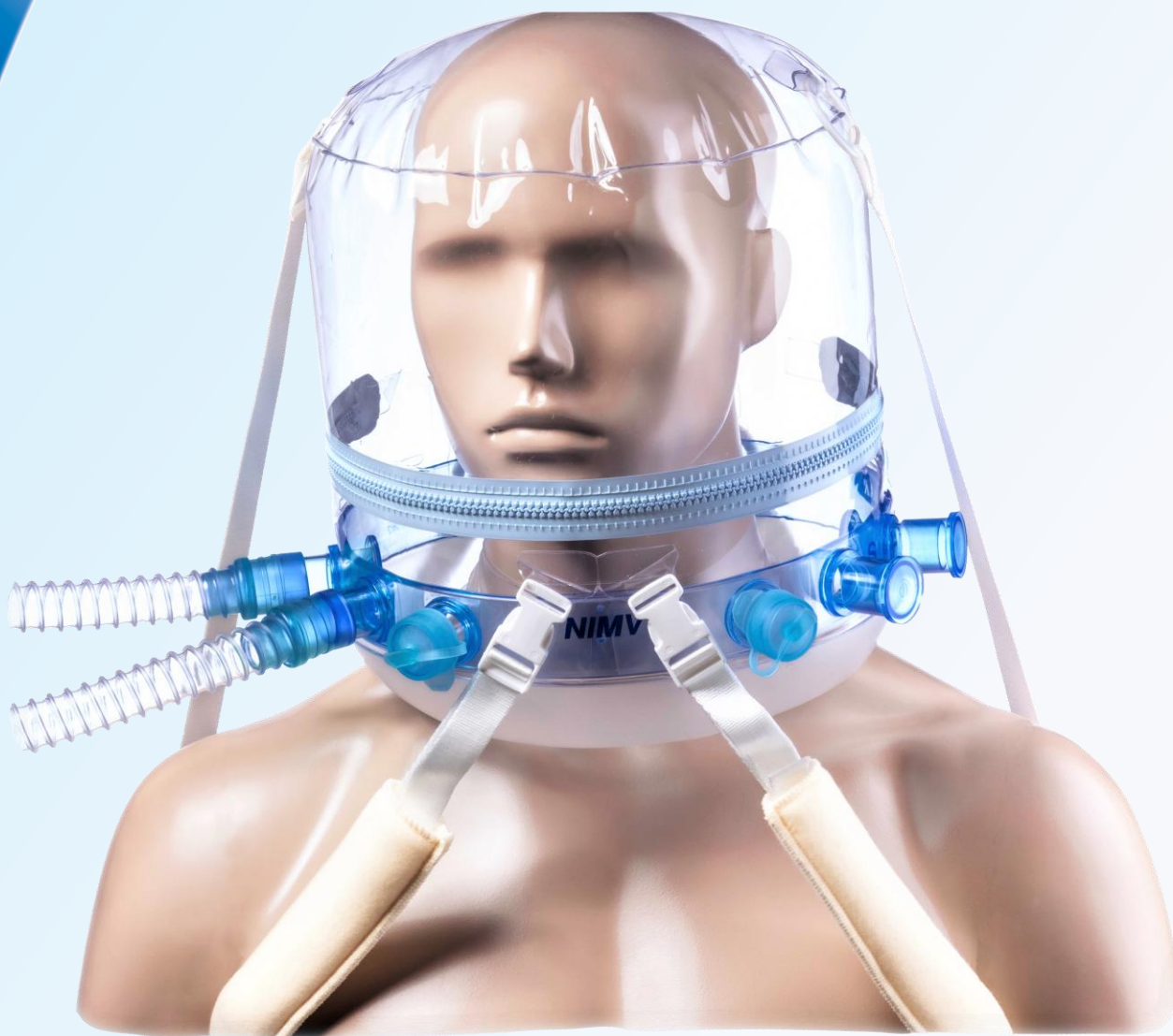

CASCHI NIMV

Casco Monopaziente per Ventilazione Meccanica Non Invasiva, utilizzabile anche in CPAP e BI-PAP, sia con pazienti adulti che bambini. Caratterizzato dalla presenza di 6 raccordi ISO posti direttamente sull'anello rigido, offre maggior EFFICACIA, PRATICITÀ e COMFORT. La versione dotata di cerniera a tenuta pneumatica consente un rapido e agevole accesso al paziente.

EFFICACIA Il collegamento direttamente all'anello rigido riduce i ritardi e migliora l'efficacia protoinspiratoria¹.

PRATICITÀ La doppia raccorderia simmetrica DX e SX consente un pratico e agevole collegamento con le apparecchiature poste su qualsiasi lato.

COMFORT La connessione tra il casco e i tubi, direttamente sull'anello rigido, rende più confortevole la diffusione dei gas e riduce il rumore interno.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Monopaziente
- Cerniera di apertura a tenuta pneumatica
- Realizzato in materiale plastico biocompatibile
- Bretelle ascellari morbide e flessibili con protezione in materiale igienico antibatterico CoolMax®
- 6 raccordi simmetrici Dx e Sx
- 2 asole di ritenuta sulla sommità del casco per un fissaggio alternativo/aggiuntivo
- Raccorderia ISO 22M, 22F
- Latex e PHT Free



VANTAGGI

- Efficace, pratico e confortevole
- Ritardo di risposta del trigger < 0,1" e migliore efficacia protoinspiratoria 1
- Rapido accesso al viso del paziente
- Possibilità di eseguire nursing, alimentazione e weaning senza togliere il casco
- Entrata ed uscita dei gas possono essere invertite o connesse dallo stesso lato; possibilità di posizionare il paziente su un fianco.

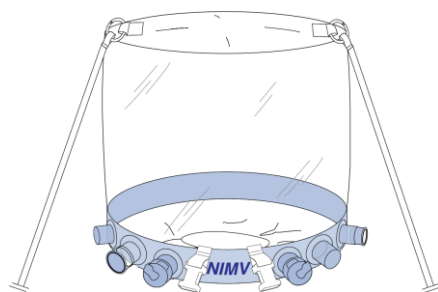

L'utilizzo del fissaggio alternativo/aggiuntivo "eyelet" previene i decubiti alle ascelle, migliora la risposta del trigger inspiratorio e il sincronismo paziente-ventilatore

RIFERIMENTI:

- In confezione Singola
- Confezione multipla da 5 pezzi
- Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta

CODICE		MISURA	Circonferenza collo (cm)	RDM	CND/EMDN
Standard	* ZIP				
600/5585	600/5586	XXS	23 ÷ 27	2683511	R0301010402
600/5228	600/5234	XS	27 ÷ 31		
600/5229	600/5235	S	31 ÷ 35		
600/5230	600/5236	M	35 ÷ 39		
600/5231	600/5237	L	39 ÷ 43		
600/5232	600/5238	XL	43 ÷ 47		
600/5233	600/5239	XXL	47 ÷ 51		
600/5580	600/5582	3XL	≥ 51		

*+/- tolleranze dimensionali escluso collare e testa paziente

¹ Comparative evaluation of different helmets on patient-ventilator interaction during non invasive ventilation. R. Costa, P. Navalesi, G. Spinazzola, M. Rossi, F. Cavaliere, M. Antonelli, R. Proietti, G. Conti. Intensive Care Med (2008) 34:1102-1108 DOI 10.1007/s00134-008-1041-8



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546

