

DIMAR

PRODUCT LINE

Intensive Care Unit

DimAir Line




CASCHI CPAP

PEDIATRICI E NEONATALI

Caschi monopaziente per il trattamento dell'insufficienza respiratoria nelle tecniche CPAP e BI-PAP in pazienti neonatali da 3 a 5 kg e pazienti pediatrici da 5 a 15 kg. Dotati di cerniera a chiusura ermetica, consentono un accesso rapido e facile al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Chiusura ermetica con cerniera.
- Connessioni simmetriche destra / sinistra per un collegamento comodo e semplice con l'apparecchiatura su qualsiasi lato.
- Patella di contenimento in materiale antibatterico igienico Coolmax®.
- Accesso a tenuta da 3 a 19 mm.
- 2 asole di fissaggio sulla parte superiore del casco per un fissaggio alternativo/ aggiuntivo.
- Connettori ISO 22M, 22F.
- Realizzato in materiale plastico biocompatibile.
- Latex e PHT free

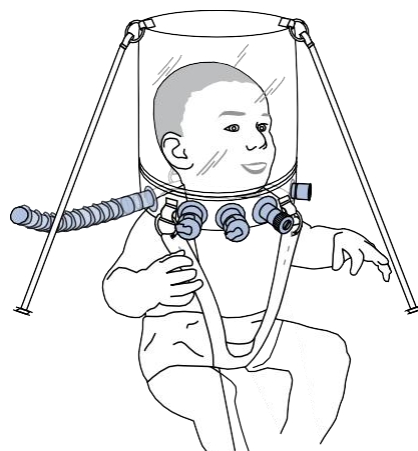

Il sistema «eyelet» permette un fissaggio aggiuntivo.

VANTAGGI

- Accesso rapido al paziente.
- Possibilità di eseguire nursing, alimentazione e svezzamento senza rimuovere il casco.
- Estremamente confortevole, pratico ed efficace.
- Privo di anello rigido, evita il decubito alla nuca del paziente.
- L'ingresso e l'uscita del gas possono essere invertiti o collegati dallo stesso lato.
- Evita la formazione di necrosi o piaghe da decubito tipiche delle maschere facciali o sondini nasali.
- In combinazione con la valvola PEEP DIMAR, garantisce la bidirezionalità dei flussi in caso di mancanza di flusso.

RIFERIMENTI:

CODICE	MISURA	RDM	CND/EMDN
500/5447	NEO	2683503	R0301010401
500/5448	PED		

- In confezione Singola
- Confezione multipla da 5 pezzi



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546

